


**CIRUGIA
ARGENTINA**

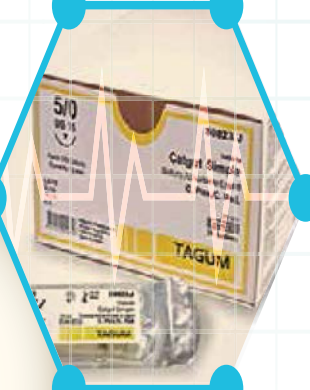

catgut
crómico

CATGUT CRÓMICO

Obtenido por la torsión de filamentos de colágeno purificado de serosa bovina, previamente tratados con sales de cromo. Este tratamiento proporciona al hilo un color marrón característico y mantiene la resistencia tensil del mismo in vivo al incrementarse el período de absorción. El Catgut Crómico se presenta en sobre tipo blíster en una solución preservante que contribuye a minimizar el arrastre tisular y a mejorar el anudado.

TIPO DE ABSORCIÓN

Por degradación enzimática.

COLOR

Marrón.

ESTRUCTURA

Virtualmente Monofilamento.

CALIBRES

USP 6/0 a USP 3.

ESTERILIZACIÓN

Oxido de etileno.



APLICACIÓN

Está indicado en aproximaciones y ligaduras de tejidos blandos interiores. Excepto en tejidos neurológicos y cardiovasculares.

PRESENTACIÓN

- Disponible en cajas de 12 y 24 unidades.



TAGUM

CATGUT CRÓMICO

REDONDA



AGUJA TAGUM		MATERIAL	LONGITUD	CALIBRE						
				5 - 0	4 - 0	3 - 0	2 - 0	0	1	2
HR 15 1/2 circ. 15 mm.		Catgut Crómico	70 cm.	C0812.J	C0912.J					
HR 20 1/2 circ. 20 mm.		Catgut Crómico	70 cm.		C0914.J	C1014.J	C1114.J	C1314.J		
HR 25 1/2 circ. 25 mm.		Catgut Crómico	70 cm.		C0915.J	C1015.J	C1115.J	C1315.J	C1415.J	C1515.J
HR 30 1/2 circ. 30 mm.		Catgut Crómico	70 cm.			C1016.J	C1116.J	C1316.J	C1416.J	C1516.J
			100 cm.				C1116.M			
HR 30 (2 ag.) 1/2 circ. 30 mm.		Catgut Crómico	150 cm.				C1116ZP			
HR 35 1/2 circ. 35 mm.		Catgut Crómico	70 cm.			C1017.J	C1117.J	C1317.J	C1417.J	C1517.J
			90 cm.				C1117.L	C1317.L	C1417.L	C1517.L
			100 cm.				C1117.M			
			150 cm.				C1117.P	C1317.P	C1417.P	
HR 35 (2 ag.) 1/2 circ. 35 mm.		Catgut Crómico	150 cm.				C1117ZP		C1417ZP	
HR 40 1/2 circ. 40 mm.		Catgut Crómico	70 cm.				C1118.J	C1318.J	C1418.J	C1518.J
			90 cm.						C1418.L	C1518.L
			100 cm.				C1118.M	C1318.M	C1418.M	C1518.M
			150 cm.				C1118.P	C1318.P	C1418.P	C1518.P
HR 40 (2 ag.) 1/2 circ. 40 mm.		Catgut Crómico	150 cm.				C1118ZP	C1318ZP	C1418ZP	
HR 50 1/2 circ. 50 mm.		Catgut Crómico	70 cm.						C1446.J	C1546.J
			90 cm.						C1446.L	C1546.L

CATGUT CRÓMICO

CORTANTE



AGUJA TAGUM	MATERIAL	LONGITUD	CALIBRE							
			6 - 0	5 - 0	4 - 0	3 - 0	2 - 0	1	2	
DS 15 3/8 circ. 15 mm. 	Catgut Crómico	70 cm.	C0723.J	C0823.J		C1023.J				
DS 20 3/8 circ. 20 mm. 	Catgut Crómico	70 cm.		C0824.J	C0924.J	C1024.J	C1124.J			
DS 25 3/8 circ. 25 mm. 	Catgut Crómico	70 cm.				C1025.J	C1125.J			
HS 40 1/2 circ. 40 mm. 	Catgut Crómico	70 cm.						C1410.J	C1510.J	
GS 60 Recta 60 mm. 	Catgut Crómico	70 cm.				C1019.J				

SUTURAS SIN AGUJA

MATERIAL	LONGITUD	CALIBRE					
		3 - 0	2 - 0	0	1	2	3
Catgut Crómico	150 cm.	C1001'P	C1101'P	C1301'P	C1401'P	C1501'P	C1601'P