


CIRUGIA ARGENTINA

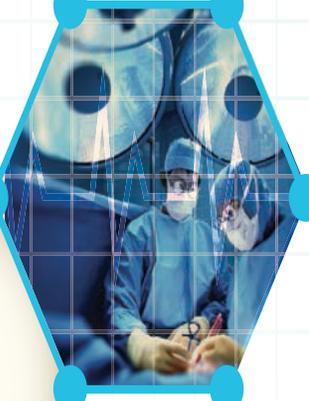

cinta de
catgut

CINTA DE CATGUT

Es una sutura quirúrgica absorbible, biológica, preparada de colágeno derivado del tejido conjuntivo purificado de res o de bovino. Tratada con sales de cromo para prolongar su tiempo de absorción, proporcionando un soporte más duradero para la cicatrización de la herida. La cinta es conservada en una solución preservante.

TIPO DE ABSORCIÓN

Por degradación enzimática.

COLOR

Marrón.

ESTRUCTURA

Cinta.

ANCHO

4 mm.

ESTERILIZACIÓN

Óxido de etileno.



APLICACIÓN

Utilizada en la aproximación parénquima hepático. Esta sutura está contraindicada en pacientes con sensibilidades o alergias al colágeno o al cromo.


PRESENTACIÓN

- Disponible en cajas de 12 y 24 unidades.

CINTA DE CATGUT

PUNTA ROMA

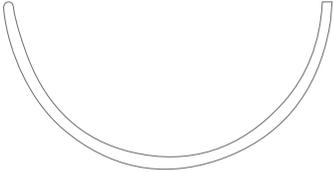

AGUJA TAGUM	MATERIAL	LONGITUD	ANCHO DE CINTA	CÓDIGO COMERCIAL
<p>HRR65P 1/2 circ. 65 mm.</p> 	Cinta de Catgut	60 cm.	4 mm	RC21511